

SSUAP-FM-45 Stylo injecteur formation



Matériel

Stylo auto-injecteur d'adrénaline **de formation** : Anapen trainer



Multiparamétrique



1 paire de gants



Indications

Stylo réservé à la formation dans le cadre de l'apprentissage à l'acte de soins d'urgence de la prise en charge de la réaction allergique grave

Acte de soin d'urgence effectué sur prescription médicale par un SP habilité à administrer un produit médicamenteux par injection auprès d'une personne présentant un tableau clinique de réaction allergique grave.

Critères d'inclusion :

- **Prescription** par un médecin régulateur ou un médecin présent sur place.
- **Signes cliniques indicatifs** : signes de détresse circulatoire et/ou respiratoire : hypotension et tachycardie et/ou détresse respiratoire. Possiblement accompagnés de signes cutanés et/ou muqueux et digestifs (urticaire ou éruption, œdème de la face, dyspnée, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée)



Risques

AUCUN RISQUE EN FORMATION : pas d'aiguille, pas d'adrénaline dans le stylo



Utilisation

Déclencher l'ANAPEN TRAINER :



ETAPE 1 : Enlever le bouchon noir protecteur de l'aiguille en tirant fortement ; cela permet également de retirer la gaine grise de protection de l'aiguille.




ETAPE 2 : Enlever bouchon gris de sécurité du bouton déclencheur en tirant.



ETAPE 3 : Appuyer fortement l'extrémité ouverte du dispositif sur la face externe de la cuisse




ETAPE 4 : Appuyer sur le bouchon rouge déclencheur, entendre un « clic ». Maintenir en position 10 sec. Retirer lentement l'auto-injecteur puis masser le site d'injection.

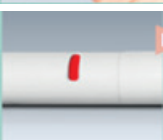

ETAPE 5 : L'indicateur d'injection est passé au rouge, ce qui indique que l'injection est terminée.

Ré-amorcer l'ANAPEN TRAINER :

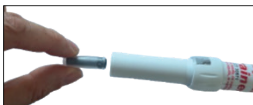

ETAPE 1 : Replacer la gaine grise de protection de l'aiguille sur la seringue factice.



ETAPE 2 et 3 : Insérer l'extrémité ouverte du dispositif dans la partie finie du bouchon noir protecteur de l'aiguille. Enfoncer le bouchon noir jusqu'au « clic »



ETAPE 4 : Remettre le bouchon gris de sécurité sur le bouton rouge déclencheur d'injection



Entretien / Maintenance

Si ANAPEN Trainer défectueux, contacter la pharmacie.



Tutoriel vidéo

