



## SDS-FM 04

## Ophtalmoscope

### Description

Disque de 18 lentilles allant de -20D à +20D



Sélection du filtre



Fenêtre d'observation

Clip de fixation avec interrupteur intégré.

Emplacement des piles

### Indication

Dans le cadre du Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO), examen de l'œil pour détecter une éventuelle atteinte de la rétine, du nerf optique et des vaisseaux sanguins.

### Précaution d'emploi

Avant l'utilisation de la lampe, il est indispensable d'effectuer un examen de la paupière afin de déterminer la présence ou non d'un corps étranger.

#### 1/ Hygiène des mains


**2/ Examen de paupière :** Vérifier l'absence de rougeur ou de grosseur (chalazion, tumeur...). Si présence d'un petit corps étranger que l'on retirera avec une compresse ou d'une éponge ophtalmique.

## Utilisation

**1/ Préparation du matériel :** Vérifier que l'ophtalmoscope fonctionne (lumière allumée, lentille propre). Si instillation de fluorescéine mettre la lentille sur le filtre vert (cf. : PISU SOUSAN).

**2/ Préparation du patient :** Vérifier l'absence de lentilles de contact. Demander au patient de fixer un point éloigné en face de lui. Expliquer l'examen et prévenir de l'éblouissement. Tamiser si possible la lumière ambiante.

**3/ Examen :** Se placer à hauteur du patient et approcher doucement jusqu'à 2-3cm du globe oculaire. Effectuer des mouvements lents en arc de cercle pour explorer la rétine. Observer la forme, la couleur et la clarté de la papille. Elle est normalement rose-orangé.

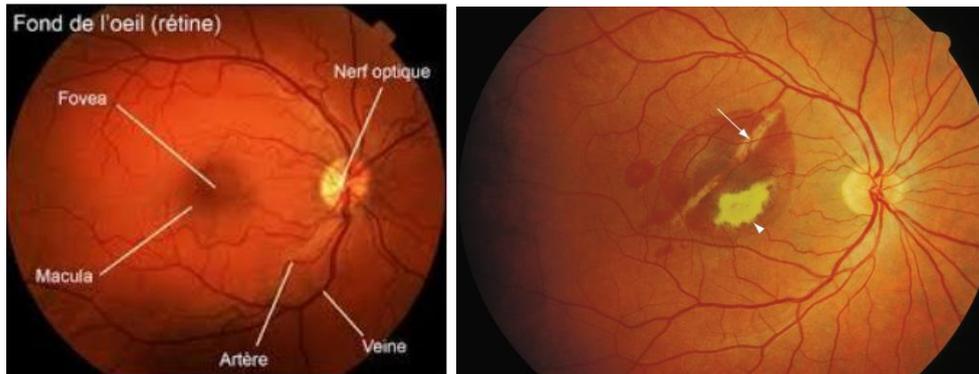

Œil normal

Exemple : œil avec une déchirure rétinienne et une hémorragie. Souvent associé à une baisse de la vision et à l'apparition de points noirs ou de flashes lumineux.

➔ Urgence ophtalmologique.

**En cas de doute ou de lésion suspecte, il est impératif de consulter un ophtalmologiste.**

**4/ Fin de l'examen :** éteindre l'appareil. Noter les résultats et informer le patient des résultats. Si besoin (et absence de corps étranger), réaliser un pansement oculaire rigide (pas de pression sur l'œil). Immobiliser la tête du patient et ne pas le laisser se frotter les yeux. Le laisser en position demie assise pour réduire la pression intraoculaire.

## Entretien/ Nettoyage

Ne pas immerger. Nettoyer après chaque utilisation.

## Tutoriel vidéo

