



FICHE TECHNIQUE Déplacement d'une victime a l'aide d'une chaise de transport

Équipier
Au VSAV
MAJ-05-2024

Q

uand

La chaise de transport peut être utilisée si :

- La victime **ne présente pas de détresse** ou d'atteinte grave.
- La victime **peut supporter la position assise**.

P


ourquoi

L'utilisation d'une chaise de transport pour déplacer une victime permet de **répondre à une difficulté réelle de brancardage en étages**, dans les escaliers ou ascenseurs étroits.

A

vec quoi

Une chaise de transport, préalablement préparée.

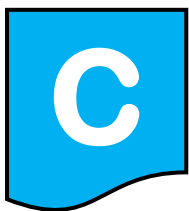

Comment

Après avoir installé et arrimé la victime sur la chaise de transport, il convient de :

- Demander à la victime de garder ses mains croisées sur sa poitrine et de ne pas essayer de s'agripper.
- Saisir la chaise par les poignées.
- Basculer légèrement la chaise de transport en arrière après avoir prévenu la victime.
- Faire rouler la chaise de transport sur le sol en prenant garde aux obstacles qui peuvent se présenter.

Lorsqu'un obstacle ou un escalier doit être franchi :

Un **deuxième** secouriste doit :

- Saisir les poignées au niveau des pieds de la victime pour aider le premier secouriste à soulever la chaise.

Un **troisième** secouriste doit :

- Précéder les déplacements de la chaise pour : ouvrir les portes, enlever les objets qui pourraient gêner le passage, sécuriser le sauveteur aux pieds en le tenant par la ceinture lors de la descente des escaliers.

Dès que possible, la chaise est placée à côté du brancard afin de procéder au transfert.



Risques

Le **verrouillage de la chaise** ainsi que l'arrimage de la victime sont **systématiquement vérifiés** avant la manœuvre afin d'éviter toute chute.

Afin de limiter les lésions du dos, les secouristes doivent **garder le dos plat** et **travailler avec les cuisses**.



Efficacités ?

La victime reste **convenablement** assise et **son état ne s'aggrave pas**.